

SKEMA 8

SKEMA 8 – je znakom excelencie.

SKEMA 8 je od firmy CASTELLINI najnovšia a najvyspelejšia stomatologická súprava. Sú v nej zabudované špeciálne nástroje, exkluzívne technológie a unikátne kleslo pre pohodlie pacienta.

Akýkoľvek špecialista od konzervatívneho stomatológa, dentálnej hygieny až po stomatochirurga, sa môžu obrátiť na SKEMU 8 s rôznymi možnosťami pre individuálne nastavenie súpravy, ako napr.:



- Implantor LED – ide o bezuhlíkový mikromotor schopný rozsiahlych torzných síl, možnosť výberu operačných módov: RESTORATIVE, ENDODONTIC, IMPLANT.
- Systém LAEC – maximum účinnosti a klinickej bezpečnosti v endodontických ošetrovaniach.
- PIEZOLIGHT – ozk svetelný, možnosť výberu operačných módov: NORMAL, ENDO, PARO.
- Autosteril – systém dezinfekcie vnútorných častí hadíc,
- Surgison 2 – exkluzívny násadec pre chirurgiu, možnosť výberu operačných módov: NORMAL, BOOST(BONE I,II,III)

Pohyby kresla: kľavé pohyby kresla pozostávajú zo synchronizovaných pohybov patientského kresla, pokiaľ opierka chrbta klesá, sedacia časť ide dopredu a pomaly sa zdvíha. Pneumatické nastavenie opierky hlavy je štandardom uľahčujúci prácu stomatológa.

Tento systém poskytuje štyri kľúčové výhody:



- udržuje si konštantnú vzdialenosť medzi operačnou zónou a stomatologickou súpravou,
- operačná **LED lampa** kopíruje pohyby kresla čím výrazne pomáha k práci stomatológa,



- vďaka kľavým pohybom kresla ostáva za opierkou chrbta oveľa viac pracovného miesta pre stomatológa,
- zachováva sa vysoký komfort pre pacienta.



SKEMA 8 sa vyznačuje excelentnou ergonomiou a manévrovateľnosťou stomatologickej súpravy aj vďaka synchronizovaným pohybom ktoré optimalizujú pracovné miesto a uľahčuje prácu v každom čase. Pracovné polohy súpravy SKEMA 8 sú vysoko flexibilné. Operačné pole je kompletne zabezpečené ergonomicky na najvyššej úrovni.

Elektricky ovládané pľuvadlo prispieva k pohodlnému ošetrovaniu pacienta.






FULL TOUCH display.

Full Touch je **plno dotykový display (5.7")**; je vyrobený z tvrdeného skla, môže sa kompletne dezinfikovať – udržiavať v čistote.

Display ponúka vynikajúcu odolnosť proti nárazu a poškrabaniu a predovšetkým zaisťuje rýchle a jednoduché ovládanie všetkých funkcií stomatologickej súpravy.

Plno dotykový display umožňuje stomatológovi nastaviť a uložiť pracovné parametre pre každý nástroj zvlášť s niekoľkými kliknutiami prsta, čo platí najmä pre Implantor LED mikromotor, ktorý vďaka tomuto novému rozhraniu je schopný všestranných funkcií a veľkého potenciálu v stomatochirurgii, a taktiež uľahčuje prácu aj v ďalších klinických ošetreniach.

USB vstup pre uloženie a nahranie vlastných nastavení, prezeranie rtg snímok.

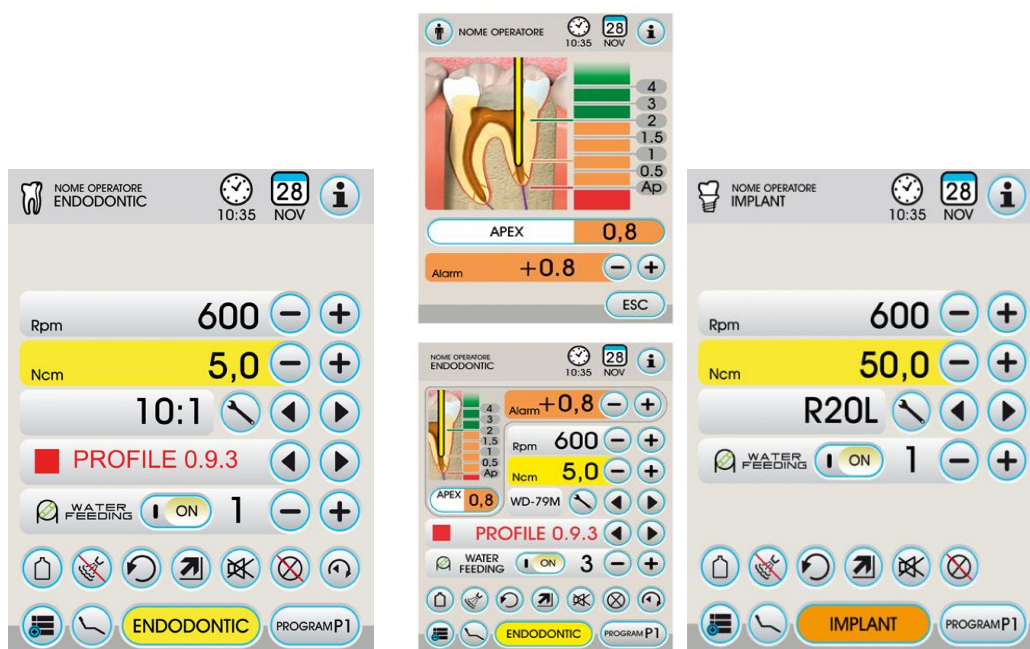

PERISTALTICKÁ PUMPA

dodávanie fyziologického roztoku pre 2 nástroje (Implantor LED, Surgison 2)

